

SILLON CLINICO GERIATRICO "DYNAMIC"**Mayor Robustez y Durabilidad. Mayor longitud de Descanso.**

Ref. SC-Dynamic
Cod. 1100



Posicion Trendelenburg

Pie partido
Cod. 1150

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Para acomodar a pacientes con enfermedad, lesión, discapacidad o deficiencia, ancianos, acompañantes y otros usuarios.

Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER.

Respaldo abatible por cilindro de gas con Trendelenburg.

Reposabrazos abatibles, gancho para bolsa de orina.

Reposapiernas escamoteable bajo asiento.

Asidero de empuje en respaldo. 2 acoples portasueros.

2 ruedecillas traseras 50 mm. para mover sillón.

Tapizado con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina,



luz UV, aceites y manchas. Protección antimicrobiana.

antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.



Con ruedas de 80 mm., 2 con freno.
Cod. 1110 / Ref. SC-Dynamic+J

VER VARIANTES Y/O ACCESORIOS PAG. 9, TARIFA ó CONSULTAR.

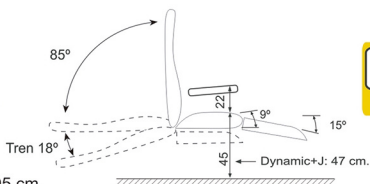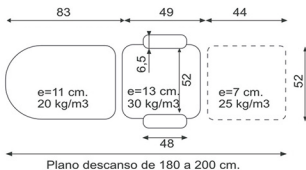

Medidas Totales Sentado: Ancho 65 x Largo 76 x Alto 105 cm.

DESCRIPCION AMPLIA:

Sillón Ergonómico Clínico Geriátrico Servitec Dynamic - acompañamiento y descanso con reposapiernas escamoteable.

Mayor Robustez y Durabilidad. Mayor longitud de Descanso extrayendo reposapiernas.

-Para acomodar a pacientes con enfermedad, lesión, discapacidad o deficiencia, ancianos, acompañantes y otros usuarios.

-Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI.

-Respaldo abatible por cilindro de gas con posición Trendelenburg.

-Reposapiernas escamoteable por guías deslizantes y velas cortadas por láser.

-Reposabrazos abatibles, gancho para bolsa de orina.

-Asidero de empuje en respaldo.

-2 acoples para portasueros.

- Gancho para bolsa de orina.

- Perfiles curvados de acero para mejor limpieza, estética y estabilidad.

- Giros-articulados antichirrido, sin mantenimiento, con rodamientos de fricción de **poliamida PA 6.6**, con ajustes radial y axial, protección antichirridos garantizado.

-Sistemas de **cilindro hidroneumáticos** de 75 kg. de fuerza (750 Nw., alemanes Stabilus ó Suspa), para respaldo abatible de accionamiento mecánico directo de balancines y levas, SIN sistemas de cable-camisa flexibles (como frenos de bicicletas, que se desajustan, se enganchan, se destensan y finalmente se rompen).

- Refuerzo cervical, lumbar y resaltes laterales ergonómicos.

- 2 Modelos según Ruedas:

***Dynamic:** 2 ruedecillas traseras giratorias de diámetro 50 mm. de diámetro, horquilla plástica de poliamida, banda doble termoplásticas de bajo ruido, no marcan (Tente, Alemania).

***Dynamic+J:** 4 ruedas, 2 de ellas con freno individual, **para transportar al paciente.** Ruedas de 80 mm. de diámetro con rodamientos, horquilla plástica de poliamida, banda termoplásticas de bajo ruido, no marcan (Tente, Alemania).

-Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2., gama Valencia, Spradling, Alemania) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.

-Sillón líder en durabilidad y longevidad, más económico del mercado de fabricación íntegra en España, y con Marcado CE, lo que da una garantía de encontrar recambios en un futuro, de una forma rápida y a precios razonables, al contrario que en las importadas.

-Los **Sillones Clínicos Geriátricos Servitec** son **fabricadas en España**, destacan por su **gran calidad y precio**.